


## Apósito para heridas profundas

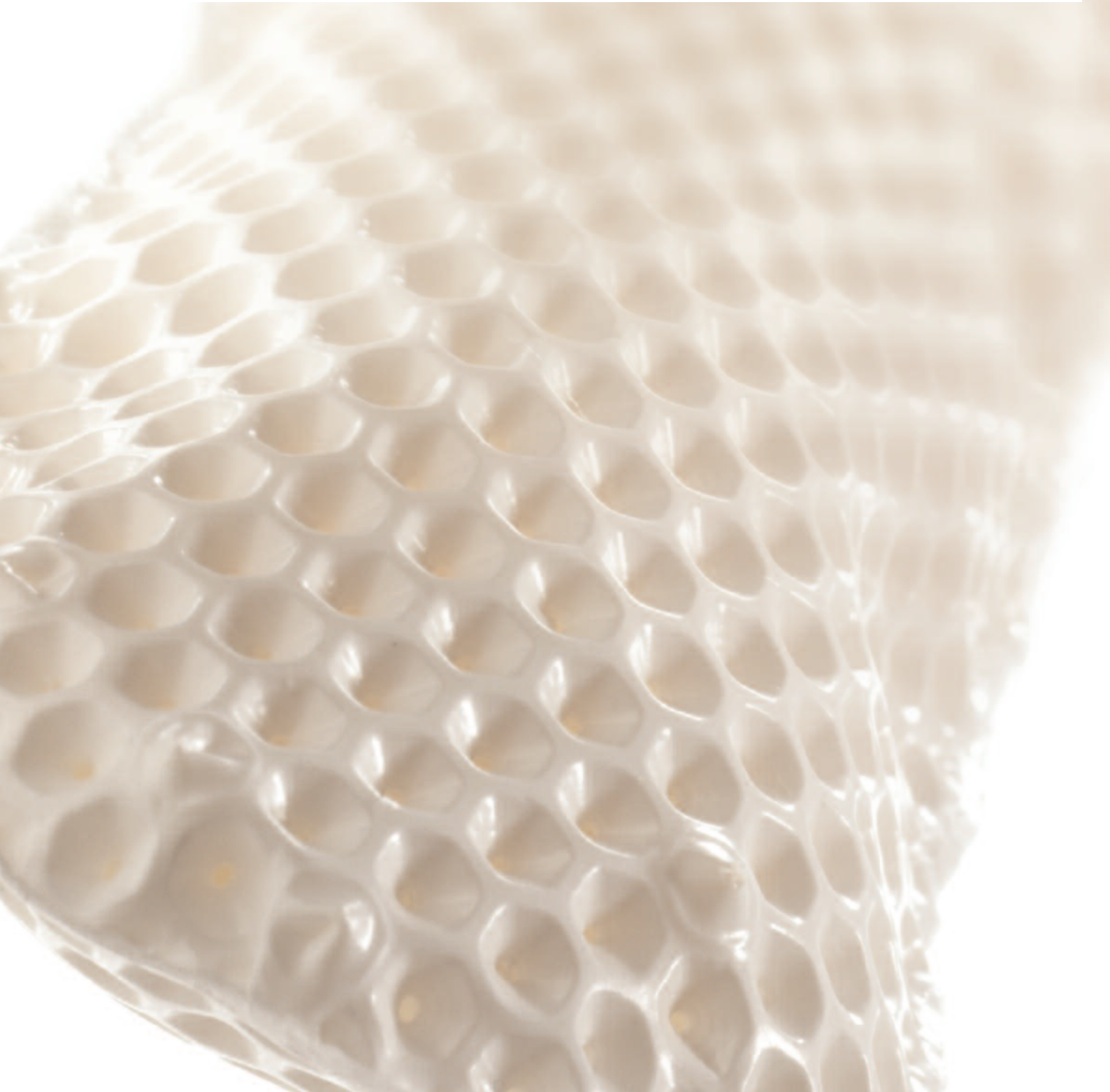

# ALLEVYN<sup>®</sup> Cavity apósito para heridas profundas

**Altamente absorbente**

**Adaptable a los contornos de la herida**

**Fácil de usar y aplicar**

**No adherente**

**Favorece el proceso de cicatrización**

ALLEVYN Cavity representa un paso significativo en el tratamiento y curación de heridas profundas. El producto está formado por partículas hidrocelulares altamente absorbentes, envueltas en una película perforada no adherente. El apósito ha sido diseñado especialmente para combinar la máxima absorción y adaptabilidad con su fácil uso y menor traumatismo para los pacientes.

## Beneficios

### Altamente absorbente

ALLEVYN Cavity son apósitos especiales para el tratamiento de heridas profundas y los problemas asociados con éstas. Su alta absorción es la consecuencia de láminas de espuma encapsuladas, que absorben el exudado no solo por capilaridad (como es el caso de los absorbentes tradicionales) sino por la absorción del fluido en el interior de su estructura hidrocelular. Como resultado obtenemos un producto de altos resultados debido a que no es necesario un cambio frecuente de apósito.

### Adaptable a los contornos de la herida

ALLEVYN Cavity está disponible en diferentes tamaños, adaptables a casi todo tipo de herida profunda. El apósito es suave y amoldable, lo que incrementa la adaptabilidad y versatilidad del producto. Además, el apósito proporciona y mantiene un óptimo contacto con la superficie de la herida mientras absorbe, minimizando el riesgo de formación de un absceso.

### Fácil de usar y aplicar

ALLEVYN Cavity está envasado individualmente y se presenta estéril. En una sola herida, si es necesario, se puede utilizar más de un apósito. El apósito o la combinación de apósitos son fáciles y rápidos de aplicar, disminuyendo el tiempo de la cura.

### No adherente

La superficie externa tridimensional en forma de panal de abeja impide que el apósito se adhiera al tejido neoformado, evitando dolor al paciente durante los cambios de apósito, se retira de una sola pieza y mantiene la integridad estructural en todo momento.

### Favorece el proceso de cicatrización

ALLEVYN Cavity mantiene la lesión en condiciones óptimas de humedad, evitando la formación de la escara y favoreciendo el proceso de cicatrización.

## Indicaciones


Los apósitos de ALLEVYN Cavity son específicos para la cicatrización de heridas en fase de granulación o mantener heridas abiertas antes de su cierre por primera intención. Específicamente: Úlceras por presión cavitadas, incisiones quirúrgicas y escisiones, ej. sinus pilonidal.

## Aplicación

ALLEVYN Cavity precisa de un apósito secundario para su fijación: OPSITE<sup>®</sup> Flexigrid<sup>®</sup> o ALLEVYN si la piel perilesional es muy delicada.

### Precauciones

ALLEVYN Cavity no debe reutilizarse. No utilizar con agentes oxidantes como soluciones de hipoclorito o agua oxigenada, dado que éstas descomponen el apósito.

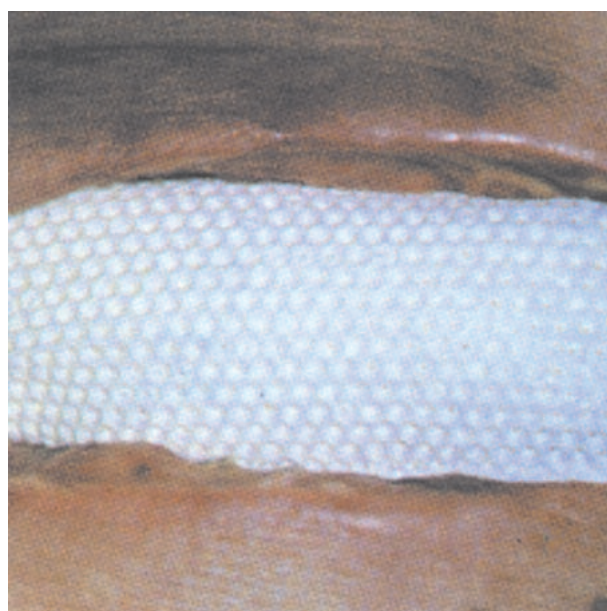

### Presentaciones

Código	Medidas	Envase
66007326	Circular pequeño 5 cm	C/10u
66007327	Circular grande 10 cm	C/5u
66007328	Tubular pequeño 9 x 2,5 cm	C/10u
66007329	Tubular grande 12 x 4 cm	C/5u

### Curación de Heridas

Smith & Nephew, S. A.  
Fructuós Gelabert, 2-4  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona)  
Tel.: 93 373 73 01, Fax: 93 373 74 53

EducacionAWC@smith-nephew.com  
www.smith-nephew.com/es/

° Marca registrada de Smith & Nephew  
© Smith & Nephew 2001